

PRODUKTDATABLAD TENA PROSKIN FLEX



Bruksområde

TENA Flex er en særdeles lekkasjesikker og behagelig beltebleie, spesielt for brukere som trenger hjelp til skift. Den finnes i fire absorpsjonsnivåer og i fire størrelser : Small, Medium, Large og X-Large, hvilket muliggjør individuell tilpasning.



Unikt elastisk belte, ComfiStretch, som ekspanderer og går tilbake i forhold til kroppens form ved stående, sittende og liggende posisjon

Unik belteforlenger for optimal passform

LekkasjebARRIERER for høy sikkerhet

Midjeelastikk foran gir høy elastisitet og en sikker passform

Diskret våtindikator

Høy elastikk i ryggen for optimal passform i korsryggen



Hoftebeltet er stabilt og mykt, det ruller ikke ned, men sitter behagelig ved bruk

Overflaten har FeelDry™-teknologi som raskt kapsler inn urin og holder huden tørr

Enkel å feste - Fikses med borrelås direkte på beltet. Kan justeres og lukkes flere ganger

Odour Neutralizer for nøytraliserende effekt på uønsket lukt

Bruksanvisning på pakken forenkler påsettingen for pleiepersonaletvåtindikator

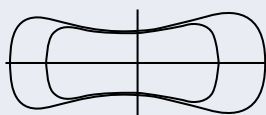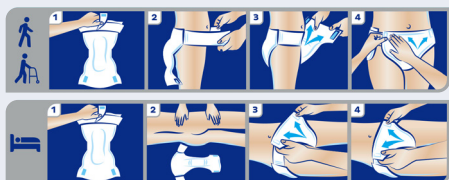

Takket være den symmetrisk formede kjernen absorberer TENA Flex like bra på begge sider. Dette gjør at den kan settes på både bak- og forfra, hvilket gir en ergonomisk arbeidsstilling for pleiepersonalet og økt verdighet for brukeren




PRODUKTDATABLAD TENA PROSKIN FLEX




TENA FLEX											
Absorpsjonsnivå/ størrelse	Svane- merket	Livvidde cm	lengde cm	Vekt g	Lår cm	Antall/ pose stk	Antall/ kart stk	ISO 11948-1 Absorpsjons- kapasitet	NAF nr.	Godkjent Helfo	Essity Art.nr
NORMAL											
Medium	✓	71-102	80			34	102	1159			73 00 82
Large	✓	83-120	86			34	102	1321			72 23 94
PLUS											
Small	✓	60-90	71	70	< 72	30	90	1522	903953	✓	73 04 38
Medium	✓	70-105	80	81	< 84	30	90	1780	921618	✓	73 04 31
Large	✓	85-120	86	95	< 99	30	90	2081	913716	✓	72 85 99
X-Large	✓	105-155	103	120	< 116	30	90	2337			72 49 60
SUPER											
Small	✓	60-90	71	83	< 72	30	90	1833	839686	✓	73 04 40
Medium	✓	70-105	80	93	< 84	30	90	2173	816980	✓	73 04 56
Large	✓	85-120	86	103	< 99	30	90	2292	899263	✓	72 86 95
X-Large	✓	105-155	103	140	< 116	30	90	2906	868296	✓	72 49 70
MAXI											
Small	✓	60-90	71	112	< 72	22	66	2654	922950	✓	73 04 47
Medium	✓	70-105	80	120	< 84	22	66	2979	898868	✓	73 04 33
Large	✓	85-120	86	143	< 99	22	66	3601	867956	✓	72 96 20
X-Large	✓	105-155	103	193	< 116	21	63	4476	921675	✓	72 85 33
ULTIMA											
Small	✓	60-90	71	127	< 72	20	60	3129			73 04 55
Medium	✓	70-105	80	144	< 84	20	60	3866			73 04 36
Large	✓	85-120	86	170	< 99	20	60	4257			72 99 09
X-Large	✓	105-155	103	219	< 116	17	51	5100			72 85 34
TENA Flex Belteforlenger			29	2,5	-	10	120				72 05 24

BRUKSANVISNING


Stående forfra

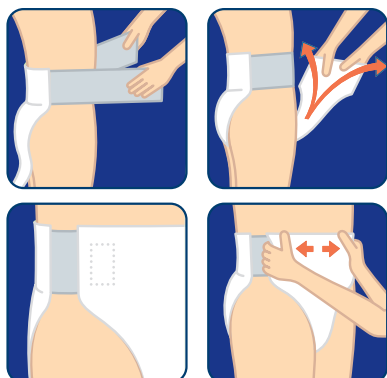

Stående bakfra

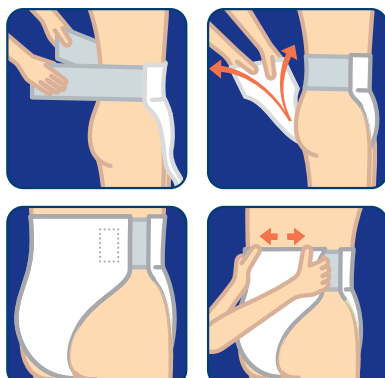

Liggende

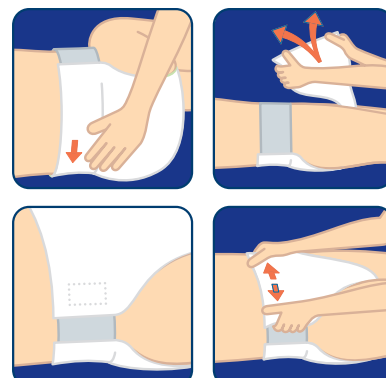

1 TENA Flex i størrelse XL har en ekstra borrelås i stedet for midjeelastikk foran, gir ekstra sikker passform

PRODUKTDATABLAD

TENA PROSKIN FLEX

Varedeklarasjon

OVERFLATE INNSIDEN

Materiale: Nonwoven

Funksjon: Tørrhet/mykhet mot huden

OVERFLATE UTSIDEN

Materiale: Nonwoven

Funksjon: Økt komfort og diskresjon

INNSLIPP- OG SPREDNINGSMATERIALE

Materiale: Polyethylene, High loft nonwoven

Funksjon: Rask absorbering og effektiv spredning av urin, hindrer urinen i å trekke tilbake til overflaten

ABSORBSJONSKJERNE, ØVRE

Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter

Funksjon: Spre, absorbere og holde på væsken

ABSORBSJONSKJERNE, NEDRE

Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter

Funksjon: Spre, absorbere og holde på væsken

SUPERABSORBENT

Materiale: Polyacrylat

Funksjon: Absorbere og holde på væsken, samt til en viss grad nøytralisere uønsket lukt

SPERRESJIKT

Materiale: Polyeten som puster

Funksjon: Forhindre lekkasje/gjennomvætning, tillate fuktig luft å ventileres ut fra produktet, og således bidra til et godt miljø for huden og komfort

HOFTEBELTE

Materiale: Non-woven

Funksjon: Fikseringsoverflate for borrelåser på produktet, mykt for huden, pustende

ELASTIKK I HOFTEBELTET

Materiale: SBS og Non-woven

Funksjon: Følge kroppens bevegelser og holde produktet på plass, komfort

MIDJEELASTIKK

Materiale: Polyeten og SBS

Funksjon: Holde produktet på plass, komfort

BENELASTIKK

Materiale: Syntetiske polyeter-polyuretantråder (Spandex)

Funksjon: Komfort og forhindre lekkasje

BARRIERELASTIKK

Materiale: Elastan

Funksjon: Forhindre sidelekkasje av urin og avføring

For samtlige TENA Flex-produkter gjelder at følgende materialer /ingredienser ikke har blitt benyttet: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, duftemner, hudpleiende midler eller parfyme.

Produktene kan benyttes inntil tre år etter tilvirkningsdato. Lagres under normale forhold, og bør ikke utsettes for ekstremer temperaturer eller fukt. Produktene er klassifisert som medisintekniske produkter, og er CE-merkede.

Kontakt oss for mer informasjon

20 70 62 00

tena.no

 **essity**

TENA,
an Essity brand

